

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Bộ dây truyền dịch dùng bơm

Chủng loại: Intrafix® Primeline

Chỉ định

Truyền dung dịch/thuốc qua đường tĩnh mạch [ví dụ: dịch/cân bằng điện giải, dinh dưỡng ngoài ổ bụng, tăng thể tích, kháng sinh, thuốc kìm hãm phát triển tế bào ung thư, các loại thuốc khác v.v.] bằng trọng lực và/hoặc bằng bơm truyền dịch.

Cảnh báo

Việc tái sử dụng thiết bị gây nguy cơ nghiêm trọng cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Nó có thể dẫn đến lây nhiễm hoặc giảm khả năng hoạt động của thiết bị.

Nhiễm khuẩn hoặc giảm chức năng hoạt động của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị thương, bị bệnh hoặc gây tử vong.

Sản phẩm vô trùng, không có chất gây sốt.

Không sử dụng nếu nắp bảo vệ bị mất.

Thận trọng

Nếu dùng băng khí ép chai dịch trong khi truyền, phải rút hết khí ra khỏi chai dịch trước khi truyền. Chú ý những cảnh báo an toàn chung.

Đối với túi và chai Ecoflac, đóng van khí trong quá trình truyền.

Giá trị đo được của thể tích liều tính theo 1ml/1m (chiều dài ống dây) ở 40⁰ C, 200 kPa (2 bar). Để đo được thể tích liều của từng vị trí chỉ định, giá trị chỉ định phải được nhân với độ dài dây (tính theo met) tính từ vị trí của bơm.

Intrafix® Primeline / Intrafix® Safe-Set có kích thước lỗ lọc $\leq 15 \mu\text{m}$. Bộ dây truyền dịch không thích hợp để truyền máu và chế phẩm máu có chứa tế bào.

Ngoài ra, việc truyền các dung dịch có độ nhớt cao, nhũ tương chất béo > 10% và độ huyền phù nhất định có thể ảnh hưởng đến tốc độ dòng truyền. Về vấn đề này, xin vui lòng tham khảo thông tin trong phần tóm tắt đặc tính sản phẩm tương ứng.

Các bước sử dụng

1-2: Kiểm tra van thông khí và khóa chỉnh giọt

3: Đâm đầu nhọn của dây truyền dịch vào chai dịch truyền theo 1 phương vuông góc 90 độ

4: Đóng khóa chỉnh giọt

5: Mồi 1 lượng dịch vào bầu đếm giọt

6: Mở khóa chỉnh giọt

6a: Mồi dịch tiếp tục đến 2/3 bầu đếm giọt

7: Mở van thông khí nếu chai dịch truyền làm bằng thủy tinh

7a: Đóng van thông khí nếu chai dịch truyền là chai nhựa tự xẹp đều


8: Đóng khóa chỉnh giọt khi đuổi hết khí ra khỏi dây truyền dịch

9: Kết nối đầu dây truyền dịch với kim luồn

10: Điều chỉnh khóa chỉnh giọt theo tốc độ truyền được ghi trong y lệnh. Lưu ý: tránh để dây truyền dịch thấp hơn giường bệnh nhân 20 cm khi đang truyền. Van thông khí phải luôn được đóng khi thao tác cắm vào chai dịch truyền.

Hình vẽ mô tả các bước sử dụng sản phẩm

Intrafix® Primeline

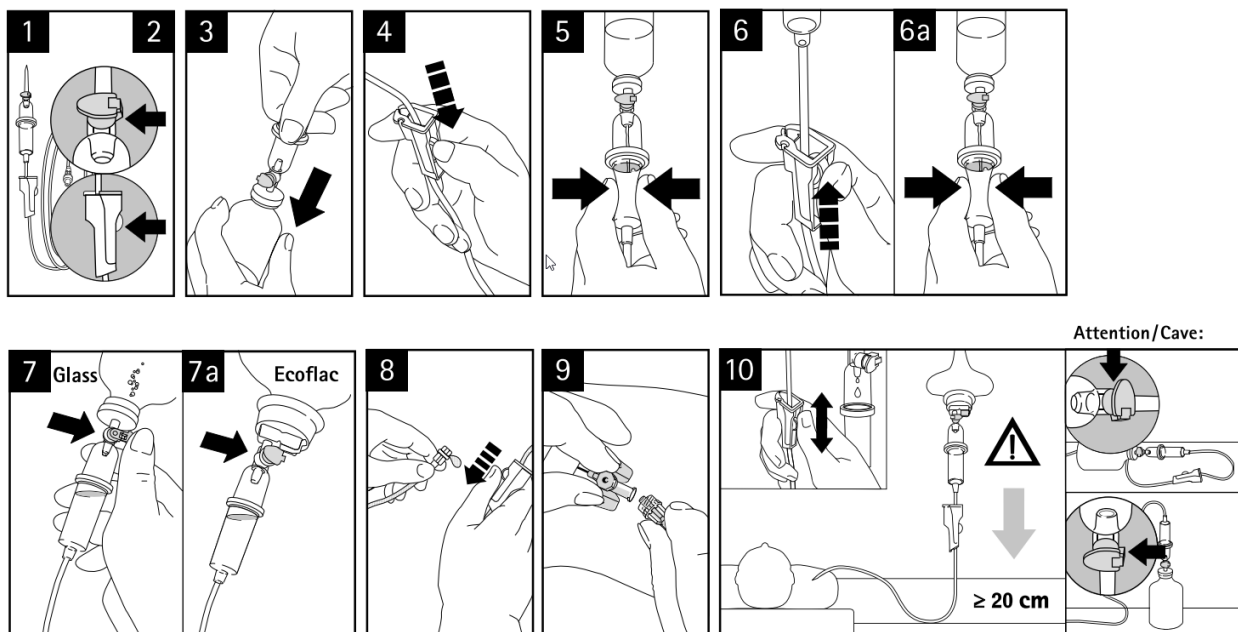

Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Đức

